

ELEVATOR

エレベーター



エレベーター ウイング



ウイング、カーブタイプ




カーブ（湾曲）タイプのため歯頸部の豊隆を乗り越えやすく歯根膜腔へのスムーズな挿入が可能です。細身のネックで視野も良好です。

エレベーター ヴェロス



剣先形状

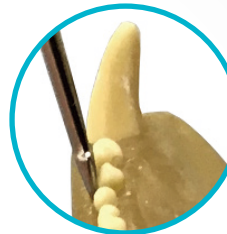

ヴェロスは非常に細い剣先形状のため歯根膜腔を発見できれば容易に挿入できます。

形状	先端幅	コード No.	商品名	形式	適応
	2mm	56866	エレベーターウイング#2	ELW-2	犬の前歯部や前臼歯 猫の臼歯
	3mm	56867	エレベーターウイング#3	ELW-3	基本サイズ
	4mm	56868	エレベーターウイング#4	ELW-4	犬歯などの大きな歯力を加えたい場合
	1.5mm	56869	エレベーターヴェロス #1.5	ELV-1.5	小型犬の乳前歯、 前臼歯の残根、猫の抜歯
	2.5mm	56870	エレベーターヴェロス #2.5	ELV-2.5	基本サイズ
	4mm	56872	エレベーターヴェロス #4	ELV-4	犬の犬歯、下顎後臼歯の癒着や残根



- ・基本的に、垂直方向の力で使用して下さい。てこの原理で持ち上げたり、強くひねると折れる恐れがあります。
- ・歯根の大きさに合ったエレベーターをお選びください。

販売元

長田電機工業株式会社

〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5
www.osada-electric.co.jp/dental/

製造販売元

株式会社イシズカ

〒101-0021 東京都千代田区外神田 6-10-5
www.tokyodental.co.jp/

オサダ
獣医科サイトは
こちら



オサダ
ネットショップは
こちら

