

中・小動物用手術台及び治療台

OSADA マーズクリーン6



Cure / 医療技術支援 Care / ころり配り Cozy / 居心地の良さ Cool / おしゃれ
マーブクリーン6は、4つのCをコンセプトに開発しました。



ペットにも
獣医師・動物看護師にも優しい
機能的なデザイン。

あらゆる診療に余裕のストローク

- 最低位が250mmと低いため、ペットが自分で乗り降り可能です。(ウサギの診療も安全に行えます。)
- 最高位が950mmまで垂直に上下するため、ペットの大きさにより変わる診療ポジションに対して、幅広く対応できます。
- テーブル下の空間がすっきりしているため、座位での診療時や保定時に足の邪魔になる物がありません。本体ベース部は安全スイッチを装備しており、緊急時にはテーブルの動作が停止できます。



最低位250mm

最高位950mm

すっきり空いたテーブル下

ボタン1つで操作可能

- メモリースイッチにより、記憶させた診療ポジションにワンタッチでセットできます。
- ローポジションスイッチにより、最低位までの動作がワンタッチで行えます。



便利なメモリースイッチ・ローポジションスイッチ

高級感と清潔感

- テーブルに白を基調とした人工大理石を使用しているため、飼い主様へ高級感と清潔感を与えます。
- テーブル下にLED照明を搭載しているため、診療空間を明るく演出します。(診療後の電源切り忘れの防止にも繋がります。)



人工大理石テーブル

テーブル下LED照明

豊富なオプション

- 無影灯を取り付ける事により、診療時に診療部位を明るく照らす事ができます。
- タブレットをセットできる、ITタブレットホルダーを取り付けることができます。
- 無影灯ポールに、猫の顔の形をしたかわいいティッシュBOXを取り付けることができます。
- 診療スタイルに合わせて、下台の足跡シールを犬・猫選択できます。



無影灯

ITタブレットホルダー

ティッシュBOX(M)-A

足跡シール 犬or猫(標準選択可)/写真は猫タイプです



写真はオプション仕様です。

Osada Medical Lineup

歯科用ユニット オサダ ポータブルユニット デイジー

オールインワンの動物歯科ユニット。
この1台でいろいろな歯科治療
を行うことができます。



骨接合又は骨手術用機械器具 オサダ サクセス-40MV2

使いやすさを考えた機能性と拡張性を備え、
1台で幅広く対応できる
万能ドリルシステムです。



歯科用多目的超音波治療器 オサダ エナック 11WV

微小パワーを含む 18 段階の
パワー設定が可能で、
処置状況を光で確認できます。
先端チップを使い分ければ、
スケーリング、抜歯補助が行えます。



Color variation [カラーバリエーション]

診療空間に合わせて選べる、3つのカラーバリエーション。




エメラルドグリーン



マリーゴールドオレンジ



オーロラピンク

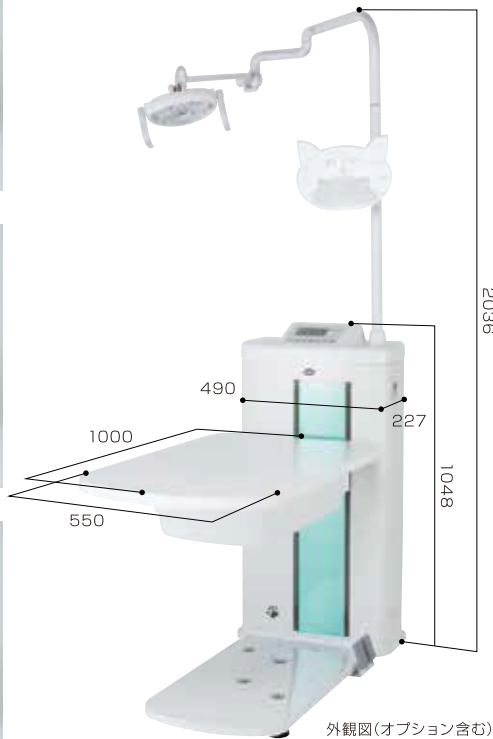

外観図(オプション含む)

Specifications [仕様]

商品名	オサダマーブクリーン 6	
形式	MC-6	
確認番号	30 動薬第 109 号	
電源	電源電圧	交流 100V
	電源周波数	50/60Hz
	電源入力	3.5A
テーブル (B型装着部)	サイズ	1000×550mm
	最低位	250mm
	最高位	950mm
	上下ストローク	700mm
	最大荷重	80kg
	材質	人工大理石
無影灯 (オプション)	ランプ	LED ランプ、13V、7W
	パターン	100×200mm
	照度	30,000Lx
	色温度	4,500K
	把手	取外し可能、オートクレープ滅菌可能
	第1アーム	可動角：360°
	第2アーム	可動角：水平より上 18° / 下 54°
アクセサリー	ティッシュ BOX(M)-A	
質量	110kg	

販売元 **長田電機工業株式会社**
〒141-8517 東京都品川区西五反田 5-17-5
TEL:03(3492)2874

製造販売元 **長田電機工業株式会社**

<https://osada-group.jp>

※印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。※商品は改良の為、予告なしに仕様を変更することがありますので、予めご了承下さい。※表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。
※表紙の無影灯はオプションです。